



a977

ambition

- sporty, young design
- Hybrid Memory Hinge™ for automatic and exceptionally comfortable fit
- Performance Steel™ temple inlays
- Traction Grip™ for supreme wearing comfort
- Temples can be shortened easily and adjusted to different head shapes
- Also wearable as sunglasses (with tinted lenses)
- Frame comes in its own hardcase incl. adidas cleaning cloth

- junges, sportliches Design
- Hybrid Memory Hinge™ für besonders komfortablen Sitz
- Bügeleinlage aus Performance Steel™
- Traction Grip™ für exzellenten Tragekomfort
- Bügel können leicht gekürzt werden und sind für verschiedene Kopfformen anpassbar
- Auch tragbar als Sonnenbrille (mit getönten Gläsern)
- Rahmen wird im Brillenetui mit adidas Reinigungstuch geliefert

- Design jeune et sportif
- Hybrid Memory Hinge™ s'adaptant automatiquement pour un ajustement confortable
- Matériel Performance Steel™ sur les branches
- Traction Grip™ antidérapant extrêmement souple pour un confort absolu
- Il est possible de raccourcir facilement les branches pour les ajuster aux différentes formes de visage
- Utilisable également comme lunette de soleil (avec verres teintés)
- Les montures sont livrées avec un étui rigide ainsi qu'une lingette nettoyante adidas



a977 10 6050
petrol/lime

a977 10 6052
phantom/orange

a977 10 6054
black/black

a977 10 6070
transparent red

a977 10 6073
transparent blue

a977 10 6074
transparent brown

a977 10 6076
matt aqua/sand

a977 10 6077
matt rose/lilac

NEW!

NEW!

one size

	mm	47 x 31 (1133 mm ²)
	mm	49
	mm	16
	mm	135
	°	8

spare parts a977

BC 606 + GK219	temple (125 mm) + AC logo part
GK 219	temple tips
SR 360/RH	temple joint screw
SP 106	soft nose pads
SP 106-1	extended soft nose pads
SP 108	hard, transp. nose pad
STG 70	showing lens 5 base
Ma977	front with side parts
PL 13	adidas cleaning cloth
SHE 166	Hardcase
FK 78-3	box

BC 606 + AC 317, GK 219



SR 360/RH

Product information

General glazing information:

- The distance between the peak of the bevel and the rear surface of the lens in the nasal area should not exceed 5.00 mm so as not to impair the function of the adjustable nose pad (see fig. 1 + 2)

A lens former is available

Allgemeine Verglasungsinformation:

- Abstand Facettenspitze zur Glasmittelfläche im nasalen Bereich sollte max. 5.0 mm betragen, um die Funktion des verstellbaren Nasenblättchens nicht zu beeinträchtigen (siehe Abb. 1 + 2)

Formscheiben erhältlich

Informations générales sur le montage:

- La distance entre le sommet du biseau et la surface arrière de la lentille dans la région nasale ne doit pas dépasser 5 mm de façon à ne pas gêner le fonctionnement des coussinets réglables au niveau du nez (voir fig. 1 + 2)

Gabarit de lentille disponible.

Options for adjusting the eyewear to individual wearers:

Inclination

- Inclinable metal hinge (note: only use parallel action pliers with plastic jaws; see fig. 3)

Temples

- marks on the inside of the temples (5 mm spacing) make it easier to shorten the temples (see figures 4 - 8)
 - the temples can be adjusted to the shape of the head and ears (see figures 9 - 10)
 - temples are available as spare parts

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten der Brille an den Träger

Inklination

- Inklinierbares Metallscharnier (Achtung: nur mit einer Haltezange mit Kunststoffbacken, in paralleler Maulstellung, inklinieren; siehe Abb. 3)

Bügel

- Markierungen an der Bügelnase (Abstände 5 mm) vereinfachen das Kürzen des Bügels (siehe Abb. 4 - 8)
 - Bügel an Kopfform und Ohrkontur anpassbar (siehe Abb. 9 - 10)
 - Bügel als Ersatzteil erhältlich


Options de réglage personnalisé des lunettes :

Inclinaison

- Charnière métallique inclinable (attention : utilisez uniquement des pinces à action parallèles avec des mâchoires en plastique ; voir fig. 3)

Branches

- Les branches peuvent être facilement raccourcies grâce aux marques espacées de 5 mm sur leur face interne (voir fig. 4 - 8).
 - Les branches peuvent être adaptées à la morphologie (tête et oreilles) (voir fig. 9 - 10).
 - Des branches de recharge sont disponibles.

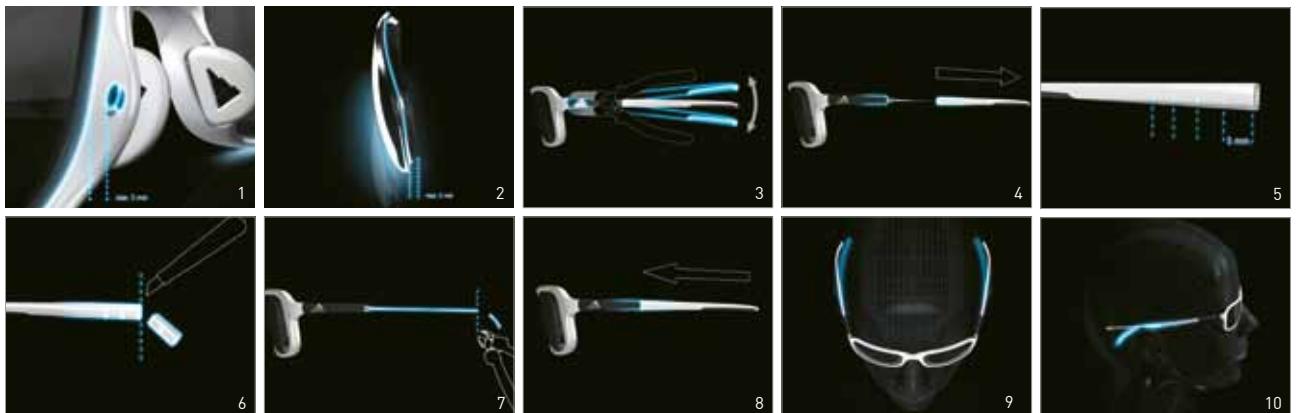

support your vision